



Masážní křeslo DF1688Y3

Návod k použití



Bezpečnostní upozornění

- Nenechávejte své dítě používat nebo hrát si s masážním křeslem. Přístroj není určen pro děti. 
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo je zcela nefunkční, okamžitě prosím přestaňte přístroj používat. Vypněte přívod elektřiny a kabel odpojte z elektrické zásuvky. Problém konzultujte se svým prodejcem.
- Pokud se během masáže začnete vlivem silné stimulace cítit nepohodlně nebo dokonce velmi špatně, nebo začne přístroj pracovat nesprávně, okamžitě křeslo odpojte z elektrické sítě a přestaňte jej používat.
- Masážní křeslo přestaňte používat, pokud je poškozen jeho povrch. V takovém případě kontaktujte svého prodejce.
- Pokud máte následující potíže, je třeba použití masážního křesla nejprve konzultovat se svým lékařem:
 - Jste v procesu léčby nebo se necítíte dobře
 - Máte problémy s páteří – abnormalita, křivost
 - Trpíte akutním onemocněním
 - Máte hyperplazii nebo vyčnívající meziobratlové disky
 - Jste těhotní nebo máte menstruaci
 - Máte horečku nebo jiné podobné potíže
- Nikdy nevkládejte ruce do funkčních částí masážního křesla.
- Předtím než začnete měnit úhel zádové nebo nožní opěrky, vždy se ujistěte, že před nebo za křeslem není postaven žádný přístroj nebo se tam nenachází žádná osoba. Ujistěte se také, že je okolo křesla dostatek prostoru. 

Masážní křeslo DF1688Y3

- Křeslo nikdy nepoužívejte, pokud je odstraněno sedadlo nebo je mokré.
- Křeslo nepoužívejte v koupelně nebo v místech s vysokou vlhkostí. Stejně tak zabraňte namočení dálkového ovladače.
- Přístroj chraňte před přímým slunečním zářením a nepoužívejte je v blízkosti zdrojů tepla jako jsou kamna a podobně.
- Nepoužívejte ředidla, těkavé oleje nebo bělicí prostředky, které by mohly způsobit změnu barvy nebo poškození potahu křesla.
- Tento přístroj není určen pro použití malými dětmi nebo osobami s malou postavou. Tyto osoby mohou masážní křeslo používat pouze pod odpovídajícím dohledem odpovědné osoby, která zajistí bezpečné používání křesla. Malé děti by měly hlídány, aby si s křeslem nehrály.



Masážní křeslo DF1688Y3

Popis částí masážního křesla




Instalace a příprava na použití



1. Otevřete balení masážního křesla a s pomocí čtyř lidí vyjměte kostru křesla (při manipulaci s křeslem buďte velmi opatrní, nepoužívejte hrubé síly).


2. Opatrně otočte opěrku zad. Pomocí přiložených šroubů a pojistných západek připevněte potah ke spodní straně zádové opěrky a pneumatický píst ke spodní části křesla (viz. obrázek).

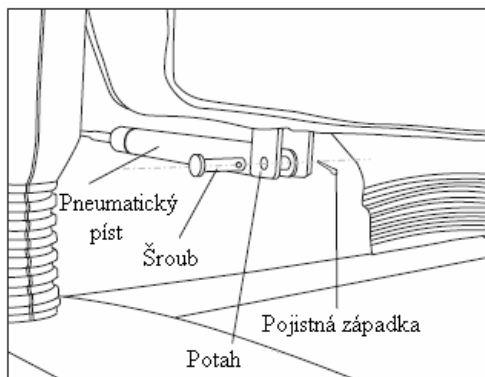


3. Najděte síťové přívody a pevně připojte zástrčky s odpovídajícími barvami.

4. Zajistěte okolo křesla dostatečný prostor, aby nedošlo ke kolizi s jinými předměty během nastavování úhlu opěrky nebo otáčení křesla.

5. Po dokončení instalace připojte síťový kabel do elektrické zásuvky a zapněte hlavní vypínač, který se nachází na pravé spodní části zádové opěrky. Poté již můžete pomocí ovládacího panelu vybrat požadované masážní funkce a užívat si komfortní relaxační masáž.

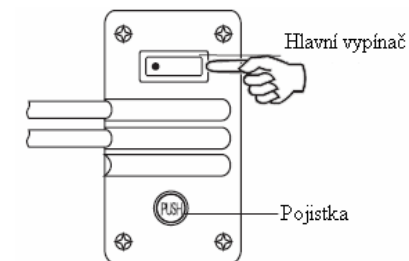


Popis a přehled funkcí dálkového ovládání

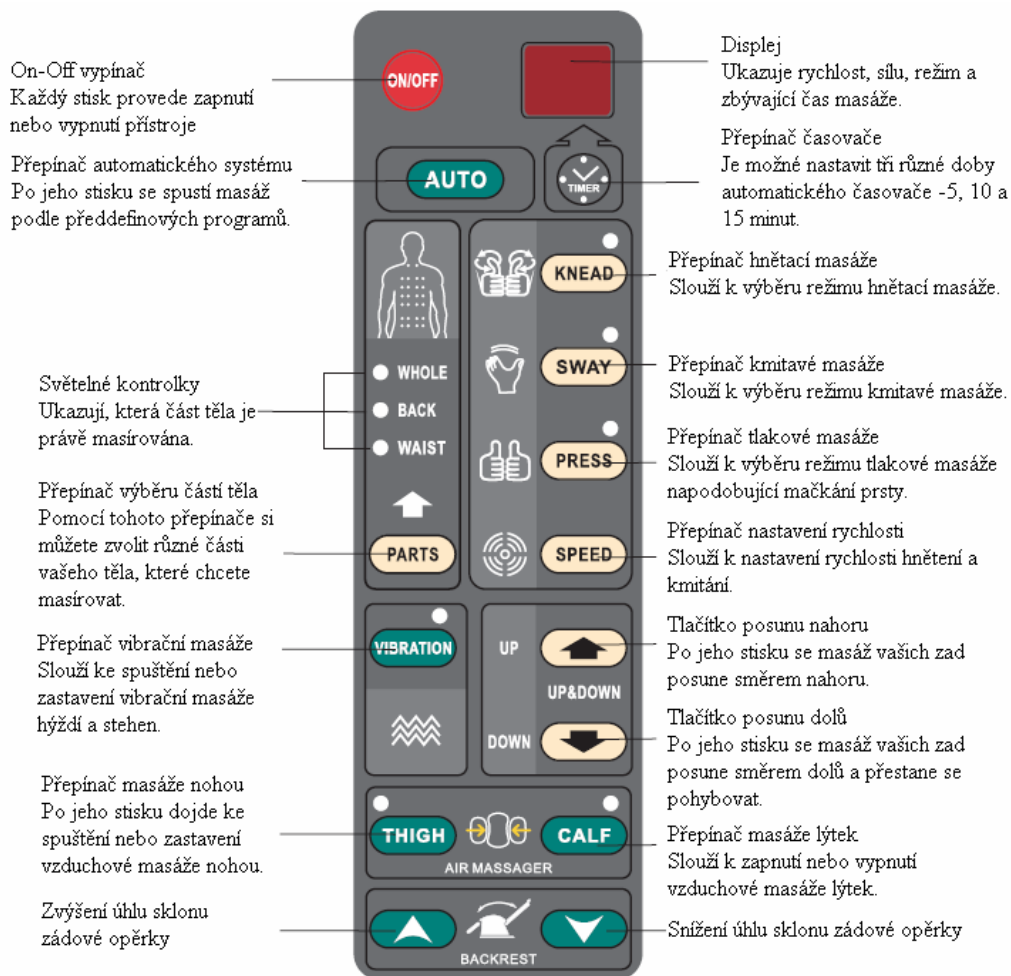


Zásady správného používání masážního křesla


I. Zapnutí masážního křesla

Na dálkovém ovládání masážního křesla stiskněte tlačítko . Tím dojde k zapnutí přístroje a masážní křeslo je připraveno k použití.

II. Nastavení času masáže





Po zapnutí masážního křesla stiskněte tlačítko časovače  sloužící k nastavení doby masáže. Je možné vybrat mezi třemi časy: 5, 10 nebo 15 minut. Na displej můžete vidět nastavený čas.

III. Automatický masážní program





Pokud požadujete automatický masážní program, pak stiskněte tlačítko , čímž dojde ke spuštění automatického režimu masáže. V tomto režimu je prováděna automatická masáž zad i nohou. Režim masáže je řízen počítačově podle přednastaveného schématu.

IV. Masáž zad

1) Volba stylu hnětání

Stiskněte tlačítko , čímž se spustí hnětací masáž zad. Obvykle je předpokládánou dráhou masážních hlavic celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka  zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž. Můžete si také pomocí tlačítek  a  posunout hnětací hlavice na konkrétní požadované místo.

2) Volba stylu kmitání

Stiskněte tlačítko , čímž se spustí kmitavá masáž zad. Obvykle je předpokládánou dráhou masážních hlavic celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka  zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž. Můžete si také pomocí tlačítek  a  posunout masážní hlavice na konkrétní požadované místo.

3) Volba stylu mačkání prsty

Stiskněte tlačítko **PRESS**, čímž se spustí tlaková masáž zad napodobující mačkání prsty. Obvykle je předpokládánou dráhou masážních hlavice celá zádová část, můžete si však pomocí tlačítka **PARTS** zvolit požadovanou část zad, u které bude prováděna masáž.


4) Volba rychlosti masáže

Během probíhající masáže je možné pomocí tlačítka **SPEED** nastavovat rychlost hnětačí nebo kmitavé masáže. Je možné volit mezi třemi rychlostmi. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka je možné nastavovat požadované rychlosti masáže. Na displeji pak můžete vidět nastavované rychlosti znázorněné znaky L1 až L3.

5) Výběr masážní oblasti

Stiskem tlačítka **PARTS** můžete volit mezi třemi různými oblastmi zad, na kterých chcete provádět masáž. Zvolená oblast je signalizována příslušnou světelnou kontrolkou.

- **Celá záda**
Masáž bude prováděna na celé oblasti zad od krku až k pasu.
- **Ramena**
Masáž bude prováděna pouze v oblasti od krku přibližně do poloviny zad.
- **Pas**
Masáž bude prováděna pouze ve spodní polovině zad.

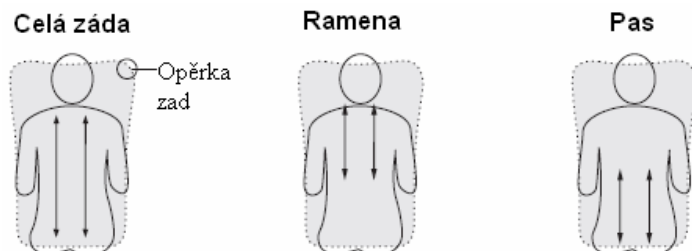

Stiskem a držením tlačítka nebo se budou masážní hlavice zádové části posouvat směrem nahoru nebo dolů. Po uvolnění tlačítka se zastaví na aktuálním místě a budou provádět bodovou masáž. Pro masážní režim mačkání prsty nelze nastavit bodovou masáž.

V. Vibrační masáž hýždí a stehen

Stiskem tlačítka **VIBRATION** se spustí vibrační motory v sedáku, které poskytují uvolňující vibrační masáž pro hýždě a stehna. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí vibrační masáže.

VI. Vzduchová masáž

Stiskem tlačítka **THIGH** se aktivuje vzduchová masáž stehen. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí vzduchové masáže stehen.

Stiskem tlačítka **CALF** se aktivuje vzduchová masáž lýtek. Dalším stiskem tohoto tlačítka dojde k vypnutí vzduchové masáže lýtek.

VII. Nastavení úhlu zádové opěrky

Pokud si přejete sklopit zádovou opěrku, pak stiskněte a držte tlačítko . Zádová opěrka se začne postupně sklápět. Naopak stiskem a držením tlačítka se začne zádová opěrka pomalu zvedat.

VIII. Nastavení podnožek

Pro nastavení sklonu podnožky je třeba zatáhnout směrem nahoru za páčku umístěnou pod levou ruční podpěrkou. Pokud za tuto páčku zatáhnete směrem nahoru a přitom lehce nadzvednete nohy, podnožka se automaticky zvedne.

Pokud chcete podnožku opět sklopit, je třeba za ovládací páčku zatáhnout směrem nahoru a přitom lehce zatlačit nohama do podnožky. Tím začne podnožka pomalu klesat. (Obdobný mechanismus je například u kancelářských židlí.)

Pokud chcete změnit délku podnožky, je třeba zatáhnout za ovládací páčku na pravé straně směrem nahoru. Poté nastavte požadovanou délku podnožky a ovládací páčku opět uvolněte. Nyní je podnožka s nově nastavenou délkou opět upevněna.

IX. Ukončení používání masážního křesla

Po dokončení masáže prosím vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a ovládací panel umístěte do ochranného pouzdra umístěného pod pravou ruční opěrku.

