

Důležité bezpečnostní instrukce

Nebezpečí

- Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem:
 - Zařízení vždy okamžitě po skončení používání odpojte z elektrické zásuvky. Přístroj odpojte z elektrické zásuvky také před jeho čištěním.

Varování

- Pro omezení rizika popálení, vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob dodržujte následující instrukce:
 - Toto zařízení by nikdy nemělo být necháno bez dozoru, pokud je zapnuté. Proto přístroj vždy po skončení masáže nebo před jeho údržbou vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
 - Vždy je nutné zajistit zodpovědný dohled, pokud je přístroj používán dětmi, postiženými nebo jinak nemocnými osobami nebo v jejich blízkosti.
 - Přístroj používejte pouze pro jeho pravý účel, který je popsán v tomto návodu k použití. Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není podporované výrobcem.
 - Nikdy nenechávejte napájecí kabel položený na horkém povrchu nebo v blízkosti žhavých předmětů.
 - Vývody vzduchu umístěné na přístroji musí zůstat vždy volné, nikdy je nezakrývejte jinými předměty. Tyto otvory je třeba pravidelně čistit od prachu, vlasů nebo podobných nečistot.
 - Nikdy do vnitřní prostor přístroje nevkládejte jiné předměty.
 - Přístroj nepoužívejte venku.
 - Přístroj nepoužívejte v místech, kde jsou používány produkty typu spreje nebo jiných postřiků. Stejně tak nepoužívejte přístroj ve vysoce prašných prostorách.
 - Přístroj připojujte pouze do správně zapojených a uzemněných elektrických zásuvek.

Masážní křeslo DF1688F3-A1

Návod k použití



Instrukce pro správné zemnění

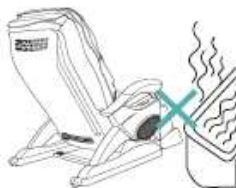
Tento přístroj musí být zemněn. V případě poruchy nebo zkratu poskytuje zemnění cestu s nejmenším odporem, poruchový proud tak odečte touto cestou, což omezuje riziko úrazu elektrickým proudem. Toto zařízení je dodáváno s elektrickou zástrčkou, která má zemnicí vodič a zemnicí kolík. Proto musí být zástrčka připojena do správné elektrické zásuvky, která je správně zapojená a zemněná podle místních norem a standardů.

Nesprávné připojení přístroje a zemnicího vodiče může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, je doporučeno nechat správné připojení zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem. Nikdy neprovádějte žádné úpravy elektrické zástrčky. Pokud zástrčka nesedí s vaší elektrickou zásuvkou, nechte si kvalifikovaným odborníkem nainstalovat správnou zásuvku.

Vždy zkontrolujte, zda přístroj připojujete do zásuvky se správným napětím a konfigurací jako je uvedeno ve specifikaci přístroje. Pro připojení není třeba žádný adaptér.

Provozní prostředí

- Křeslo nepoužívejte ve vysoce vlhkém nebo prašném prostředí, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje.
- Křeslo nepoužívejte v místnosti s teplotou vyšší než 40°C.
- Křeslo nepoužívejte v blízkosti topných těles nebo radiátorů, stejně tak je nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Křeslo umístěte a používejte vždy pouze na rovném povrchu.



POZOR!

Křeslo byste měli používat v místnostech s běžnou pokojovou teplotou, nikdy pokojovou teplotu nezvyšujte náhlým způsobem. Je doporučeno, zvyšovat pokojovou teplotu postupně až po dosažení normální úrovně. Pokud je křeslo uskladněné v chladném prostředí a vy jej chcete přesunout na teplé místo, je třeba nechat křeslo hodinu stát v novém prostředí a až poté jej zapnout. Pokud by bylo křeslo zapnuté ihned po přesunu, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nevyhovující uživatelé

Dále uvedení uživatelé musí použití křesla konzultovat se svým lékařem:

- Ti, kteří jsou aktuálně v lékařské péči nebo se necítí dobře.
- Ti, kteří mají nějaký zhoubný nádor.
- Osoby trpící srdečními chorobami.
- Těhotné ženy nebo ženy s menstruací.
- Ti, kteří mají od svého lékaře nařízenou léčbu klidem.
- Ti, kteří mají nějaké problémy s páteří, nebo někdy prodělali nějaká vážná onemocnění nebo úrazy páteře.
- Ti, kteří mají horečku.



Bezpečnostní opatření během používání

- Pro zajištění bezpečnosti a správného používání tohoto masážního křesla je třeba, aby si každý uživatel před prvním použitím pečlivě přečetl tento návod k použití.
- Nepoužívejte křeslo ve spojení s jinými terapeutickými zařízeními nebo elektrickými přikrývkami, a podobnými přístroji. Výsledkem by mohl být negativní efekt masáže nebo dokonce zranění uživatele.
- Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si v okolí křesla, zejména pak za zádivou opěrkou nebo pod podnožkou. Jinak by mohlo dojít ke zranění dítěte.
- Nepokládejte na zádivou opěrkou, opěrkou rukou nebo podnožku žádné těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození křesla nebo dokonce ke zranění uživatelů, pokud by tento předmět spadnul.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je vaše tělo mokré.
- Křeslo neovládejte s mokřými rukama.
- Souvislá dlouhá masáž jednoho místa na vašem těle může způsobit nadměrnou stimulaci, která může být kontraproduktivní.
- Nevkládejte vaše ruce nebo nohy do blízkosti masážních hlavic, pokud je křeslo zapnuté, jinak by mohlo dojít ke zranění.



Masážní křeslo DF1688F3-A1

POZOR!

- Během používání křesla vždy sedíte ve vzpřímené poloze.
- Pokud požadujete jemnější masáž, můžete přes zádovou opěrku položit ručník nebo deku.
- Použití masážní křesla jako postele není doporučeno.
- Masážní hlavice neumísťujte přímo na hlavu, ramenní klouby nebo břicho apod.
- Doporučené doba masáže je 15 minut, zároveň není také doporučeno provádět masáž na jedno místě déle než 5 minut.

Kdy by křeslo nemělo být používáno

Pokud se objeví některá z následujících událostí, vypněte prosím okamžitě hlavní vypínač do polohy OFF a odpojte křeslo z elektrické zásuvky. Poté kontaktujte servisní centrum:

- Pokud dojde náhodou k políání křesla vodou. Pokračování v používání křesla za takovýchto podmínek může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Pokud během masáže začnete pociťovat abnormální nebo prudkou bolest, okamžitě přestaňte v masáži a problémy konzultujte s lékařem.
- Pokud se během používání objeví nějaká závada nebo abnormální chování přístroje.
- Pokud dojde ke ztrátě elektrického napětí. Náhlé znovu-zapnutí by mohlo způsobit zranění.
- Pokud se objeví náhlý záblesk.

Poznámka: Pravidelně provádějte kontrolu polstrování hlavního potahu tím, že zvednete zádovou opěrku a zkontrolujete, zda potah neobsahuje trhliny.

VAROVÁNÍ!

Křeslo nepoužívejte, pokud je hlavní potah potrháný. Okamžitě odpojte elektrickou zástrčku z elektrické zásuvky. Používání křesla za takových podmínek může způsobit zranění nebo úraz elektrickým proudem.

Masážní křeslo DF1688F3-A1

Rozebírání a opravy křesla

- Nikdy neodstraňujte zadní kryt z křesla, kontakt s vnitřním mechanismem křesla může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Křeslo může být opravováno pouze v specializovaném servisním centru a uživatel křeslo nesmí sám rozebírat nebo opravovat.

Poznámky k napájecímu kabelu a elektrické zástrčce

Před připojením křesla do elektrické sítě zkontrolujte hodnotu napětí vaší elektrické sítě, aby odpovídala uváděné hodnotě v technické specifikaci křesla.

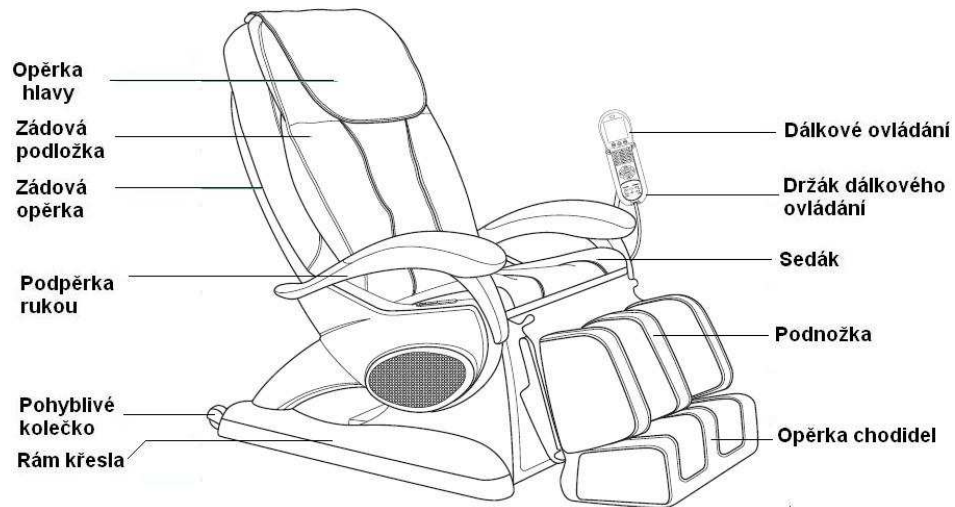
- Neodpojujte elektrickou zástrčku z elektrické sítě příliš prudce.
- Nepřipojujte nebo neodpojujte napájecí kabel mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky, držte vždy kabel za zástrčku, nikdy pouze za samotný kabel.
- Přestože je křeslo vybaveno automatickým časovačem vypnutí, nezapomínejte po skončení masáže přístroj vždy vypnout hlavním vypínačem.
- Neumisťujte napájecí kabel pod křeslo, mohlo by dojít k jeho poškození a následně k úrazu elektrickým proudem.
- Křeslo nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen. Používejte pouze náhradní příslušenství chválené výrobcem nebo servisním střediskem.
- Nepoužívejte křeslo, pokud je elektrická zásuvka příliš uvolněná.

Opatření pro dálkový ovladač

- Na dálkový ovladač nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte těžké předměty.
- Vyvarujte se pádu ovladače na zem. Je doporučeno ukládat dálkový ovladač do jeho držáku, pokud není delší dobu používán.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte nadměrnou sílu.
- Dálkový ovladač neovládejte s mokřými rukama.
- Při práci s dálkovým ovladačem nepoužívejte žádné ostré nebo těžké předměty, mohlo by dojít ke zničení ovladače."

Tento návod prosím uschovejte!

Popis částí masážního křesla




Dálkové ovládání



Popis částí a funkcí dálkového ovládání



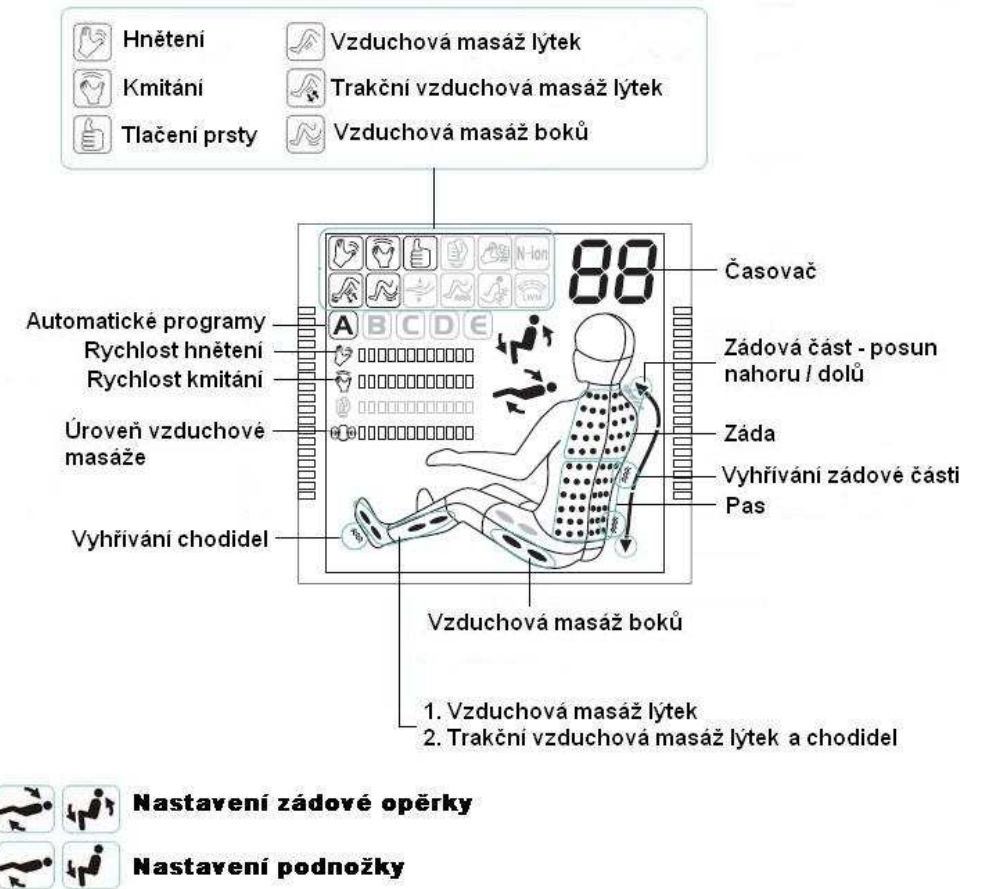Popis LCD displeje



Příprava masážního křesla před jeho použitím

Vybalení, rozložení a složení křesla

Masážní křeslo je zabaleno v poloze se sklopenou zádovou částí. Po vytažení křesla z krabice je tedy třeba zádovou opěrku zvednout a upevnit v její správné poloze. Dosažení správní polohy je signalizováno slyšitelným cvaknutím.

Při skládání křesla zpět do krabice postupujte následovně:

1. Odstraňte polštářky a podložky z opěrky hlavy a ze zádové části.
2. Stiskněte ovládací páčku zádové části směrem dolů.
3. Sklopte zádovou část křesla směrem dopředu.

1. Zvedněte zádovou část křesla do vzpřímené polohy.



2. Stiskněte ovládací páčku zádové části směrem dolů, čímž dojde k jejímu uvolnění ze zajištěné polohy.

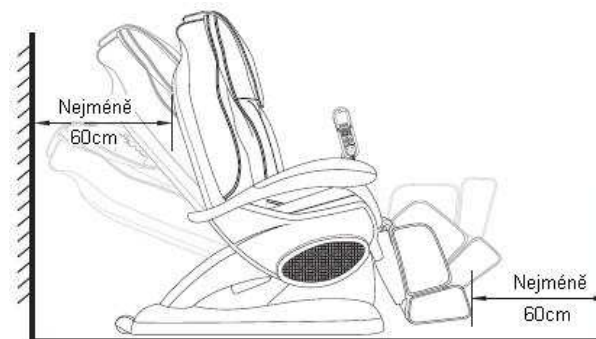


3. Sklopte zádovou část křesla směrem dopředu.

Při rozkládání a skládání masážního křesla buďte vždy velmi opatrní a nikdy nepoužívejte nepřiměřené síly.

Umístění křesla

- Z důvodu polohování zajistěte před křeslem i za ním dostatečný prostor
- Ujistěte se, že je před i za křeslem volné místo alespoň 60cm.




UPOZORNĚNÍ!

- Aby jste předešli poškrábání podlahy, umístěte pod křeslo koberec.
- Ujistěte se, že nejsou v okolí křesla umístěny žádné předměty, které by bránily správné funkci polohování.

Instalace držáku dálkového ovládání


- Držák dálkového ovládání nainstalujte a pomocí dvou šroubů řádně upevněte na levé straně masážního křesla. Zdířka pro připevnění držáku je skryta pod plastovou krytkou, po nainstalování držáku krytku opět zaklapněte na její místo.
- Držák dálkového ovládání lze volně nastavovat do požadované polohy. Na zadní straně držáku je jistící šroub, který umožňuje polohování držáku. Jakmile nastavíte držák do požadované polohy, tento jistící šroub utáhněte, čímž upevníte držák ve vámi požadované poloze.
- Dálkové ovládání se do držáku vkládá z horní strany. Při vyjímání dálkového ovládání jej uchopte za jeho horní část a vytýhněte směrem nahoru z držáku.

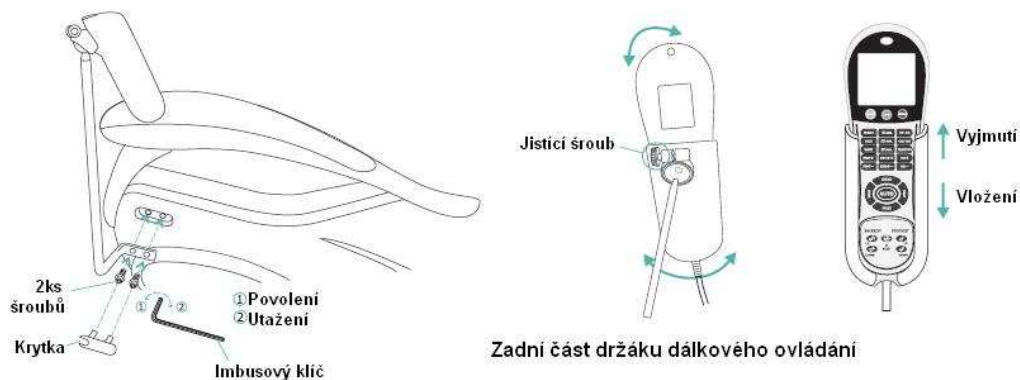Masážní křeslo DF1688F3-A1



Instalace sedáku

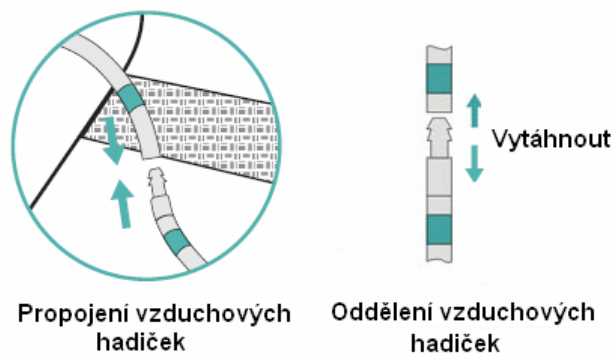- Když instalujete sedák, je třeba nejprve spojit konec jedné vzduchové hadičky s koncem druhé vzduchové hadičky.
- Hadičky do sebe navzájem zasuněte tak, aby barevné značky obou konců na sebe téměř navazovaly a hadičky byly pevně propojeny, aby se předešlo ucházení vzduchu. Při rozpojování pouze vzduchové hadičky rozpojte jejich vzájemným vytáhnutím.
- Sedák se ke kostře křesla připevňuje pomocí dvou suchých zipů.




Masážní křeslo DF1688F3-A1

Podložka opěrky hlavy



- Podložka opěrky hlavy je k zádové opěrce připevněna pomocí pásku suchého zipu. Při instalaci podložky opěrky hlavy stačí oba díly k sobě přilepit pomocí lepicího pásku, tak aby na sebe obě části lepicího pásku přesně seděly. Při sundávání stačí pouze opěrku hlavy přímo odlepit od zádové opěrky (A).

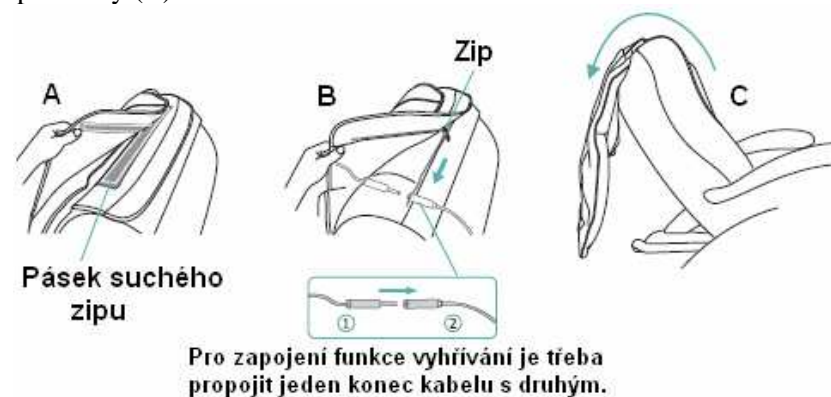
Podložka opěrky zad




- Polštář opěrky zad je se samotnou opěrkou spojen pomocí zipu. Pro svlečení nebo nasazení polštáře stačí pouze rozepnout nebo zaškrtnout zip (B).
- Instalace vyhřívací funkce:
 - a) Zapojte jeden konec kabelu ① k druhému ②.
 - b) Při rozpojování, jeden konec odpojte od druhého.
- Pokud se vám zdá, že je síla masáže nedostatečná, můžete podložku otočit na zadní část opěrky zad a dopřát si tak intenzivnější masáž bez použití podložky (C).



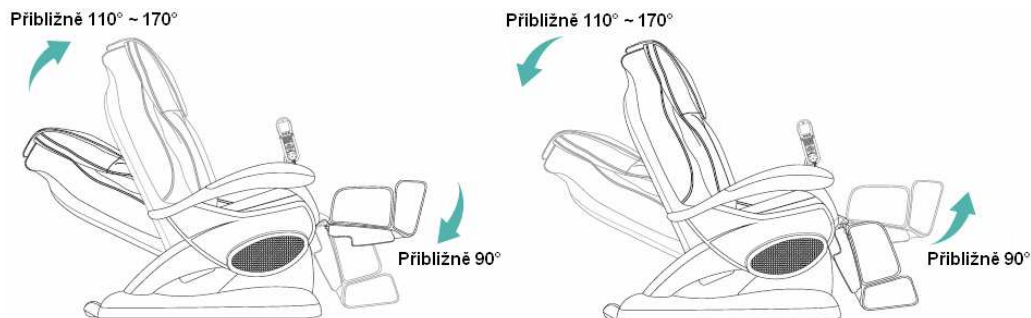Ovládání polohovacího systému


- Polohování zádové opěrky
 - Pro sklopení zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
 - Pro zvednutí zádové opěrky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.



- Polohování podnožky
 - Pro zvednutí podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
 - Pro sklopení podnožky stiskněte a držte tlačítko , dokud nebude opěrka ve vámi požadované poloze.
- Vyresetování polohy zádové i nožní opěrky
 - Pro navrácení zádové a nožní opěrky do jejich základní polohy stiskněte resetovací tlačítko .


UPOZORNĚNÍ!

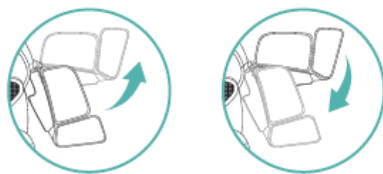- Během nastavování výšky podnožky nestrkejte prsty ani jiné předměty do mezery mezi sedákem a podnožkou.
- Během nastavování úhlu sklonu zádové a nožní opěrky nesmí být umístěny v okolí křesla žádné předměty, které by překážely správnému nastavení polohy opěrek.



Nastavení délky podnožky

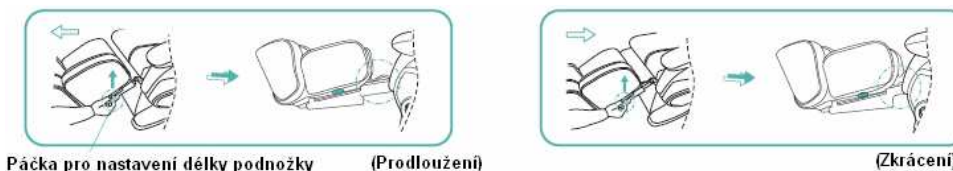- Pro maximální pohodlí uživatelů masážního křesla je možné nastavit délku podnožky. Toto nastavení délky je možné v jakékoli poloze nožní opěrky. Zvedněte páčku sloužící pro nastavení délky podnožky a poté zatlačte nebo povytáhněte podnožku tak, abyste získali její požadovanou délku (prodloužení nebo zkrácení přibližně o 8cm). Poté opět uvolněte ovládací páčku a tím dojde k zajištění podnožky v dané poloze.




Přesouvání masážního křesla

- **Přenášení:** Při přepravě masážního křesla by jej měly držet alespoň dvě osoby na každé straně. Křeslo přenášejte uchopením za jeho rám.
- **Přesun:** Uchopte podnožku masážního křesla a zvedněte ji nahoru. To způsobí, že jezdicí kolečka na zadní spodní straně rámu se budou dostatečně dotýkat podlahy, což umožní křeslo lehčeji táhnout nebo tlačít po podlaze.

UPOZORNĚNÍ!

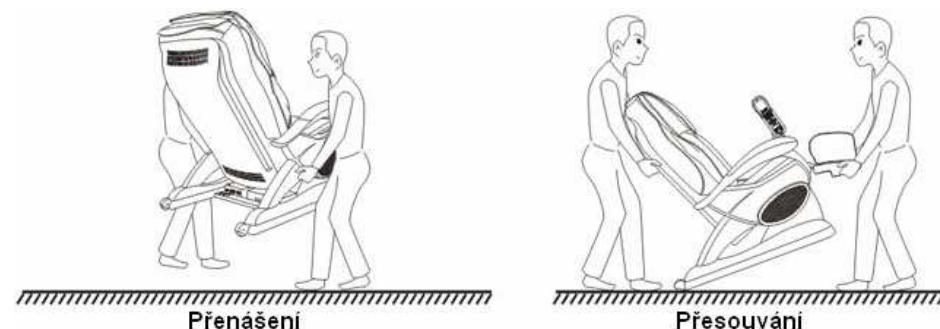Před přenášením nebo přesouváním křesla vždy nejprve odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.




Zapnutí napájení

2. Připojte AC napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Pomocí hlavního přepínače umístěným na elektronické ovládací skříňce, která se nachází na zadní spodní straně masážního křesla, křeslo zapněte.

UPOZORNĚNÍ!

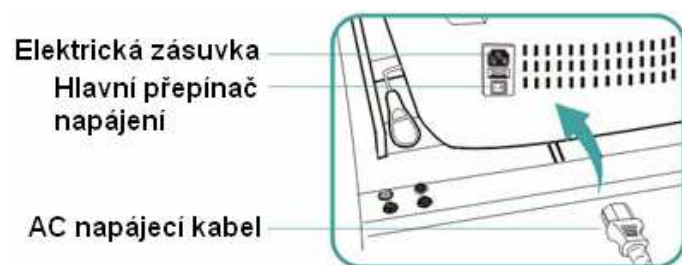- Ujistěte se, že napájecí kabel není skřípnut pod masážním křeslem.
- Ujistěte se, že všechny přepínače (včetně hlavního) jsou před připojením napájecího kabelu do elektrické zásuvky v poloze „0“.
- Pokud jsou masážní hlavice zádové části křesla umístěny vlivem poslední prováděné činnosti uprostřed zádové části, dojde po opětovném zapnutí hlavního přepínače do polohy „I“ k jejich návratu do jejich základní polohy.











Po použití

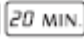


- Díky časovací funkci, dojde k automatickému vypnutí křesla po uplynutí doby masáže 30 minut. Poté prosím přepněte hlavní přepínač do polohy „0“, čímž křeslo vypnete.
- Abyste předešli poruše křesla nebo případnému zranění dětí nebo jiných osob, nezapomínejte vždy po skončení masáže křeslo vypnout hlavním vypínačem a odpojit napájecí kabel z elektrické zásuvky.

Masážní programy

Časová funkce automatického vypnutí

- Po stisku tlačítka  můžete nastavit čas udávající délku masáže.
- Základní délka masáže je 30 minut. Pokud nezvolíte jiný čas, masáž bude automaticky zastavena po 30 minutách.
- Pomocí tlačítek    můžete nastavit váš požadovaný čas masáže. Po nastavení času se spustí odpočítávání, po jehož skončení se automaticky zastaví aktuální procedura masáže.
- Při přepínání mezi automatickými a ručními masážními programy se nastavená doba časovače nemění. Pokud je třeba změnit čas masáže, stačí stisknout některé z tlačítek   .
- Stiskem tlačítka  dojde k zastavení masáže.

Automatické masážní programy

- Stiskem tlačítka  na dálkovém ovládacím zařízení se spustí automatický masážní program a na LCD displeji se zobrazí odpovídající symbol . Nyní si můžete užívat souvislou masáž, která v sobě kombinuje všechny masážní techniky a je řízena automaticky.
- Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení tohoto automatického programu.

Ruční masážní programy

Masážní křeslo však umožňuje také nastavení a zkombinování masážních programů přesně podle vašich potřeb. Můžete si tak zvolit kterýkoli masážní režim a u něj se nastavit požadovanou rychlost nebo oblast masáže.












- **3 masážní programy zádové oblasti**
 - Hnětací masáž
 - Kmitavá masáž
 - Tlaková masáž – mačkání prsty
- **3 programy vzduchové masáže**
 - Vzduchová masáž lýtek
 - Trakční vzduchová masáž lýtek
 - Vzduchová masáž boků
- **1 doplňkový masážní program**
 - Funkce vyhřívání

Při výběru masážního programu nahlédněte do následující tabulky, kde jsou uvedeny detailní informace o jednotlivých programech.








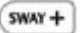
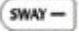


Masážní programy	LCD	Nastavení rychlosti	Úroveň	Části	Nahoru / dolů
Hnětení		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kmitání		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mačkání prsty				<input checked="" type="checkbox"/>	
Vzduchová masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>		
Trakční vzd. masáž lýtek			<input checked="" type="checkbox"/>		
Vzduchová masáž boků			<input checked="" type="checkbox"/>		
Vyhřívání zad					
Vyhřívání chodidel					

Ovládání masážních programů zádové části







1. Hnětací masáž

- Stiskem tlačítka  se spustí hnětací masáž a na LCD se objeví odpovídající ikona .
- Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad (  ) , pro kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = horní část, „WAIST“ = dolní část zad)
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete posouvat masážní hlavice v zádové části buď směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě.
- Pokud chcete nastavit rychlost masáže, stačí stisknout tlačítko  pro zvýšení nebo tlačítko  pro snížení rychlosti. Nastavovaná rychlost bude zobrazována na LCD displeji ()
- Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení hnětací masáže.

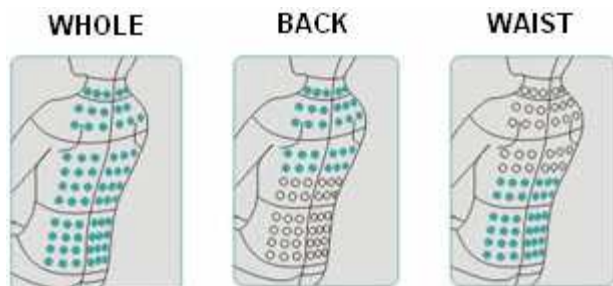
2. Kmitavá (kymácivá) masáž

- Stiskem tlačítka  se spustí kmitavá masáž a na LCD se objeví odpovídající ikona .
- Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad (  ) , pro kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = horní část, „WAIST“ = dolní část zad)
- Stiskem a držením tlačítka  nebo  můžete posouvat masážní hlavice v zádové části buď směrem nahoru (UP) nebo dolů (DOWN). Po uvolnění tlačítka se masážní hlavice zastaví na aktuálním místě.
- Pokud chcete nastavit rychlost masáže, stačí stisknout tlačítko  pro zvýšení nebo tlačítko  pro snížení rychlosti. Nastavovaná rychlost bude zobrazována na LCD displeji ()
- Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení kmitavé masáže.

3. Tlaková masáž – mačkání prsty




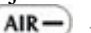


- Stiskem tlačítka  se spustí tlaková masáž napodobující mačkání prsty a na LCD se objeví odpovídající ikona .
- Nyní si můžete zvolit konkrétní část zad (  ) , pro kterou bude masáž prováděna. („WHOLE“ = celá záda, „BACK“ = horní část, „WAIST“ = dolní část zad)
- Dalším stiskem tlačítka  dojde k zastavení kmitavé masáže.

Následující obrázek zobrazuje rozdělení zad na zmíněné tři masážní oblasti




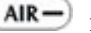

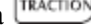


Ovládání vzduchové masáže

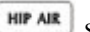





1. Vzduchová masáž lýtek a chodidel

- Stiskem tlačítka  se spustí vzduchová masáž lýtek a chodidel a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .
- Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji () .
- Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví.



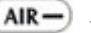2. Trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel

- Stiskem tlačítka  se spustí trakční vzduchová masáž lýtek a chodidel a na LCD displeji se zobrazí odpovídající ikona .
- Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji () .
- Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví.


3. Vzduchová masáž boků

- Stiskem tlačítka  se spustí vzduchová masáž boků a na LCD displeji se objeví odpovídající ikona .
- Pomocí tlačítka  nebo  můžete zvýšit nebo snížit úroveň vzduchové masáže. Je možné zvolit mezi 4 různými úrovněmi a nastavená úroveň bude vždy zobrazena na LCD displeji () .
- Další stiskem tlačítka  se masáž zastaví.

Ovládání funkce vyhřívání

- Stiskem tlačítka  se spustí vyhřívání zad a chodidel a na LCD se objeví odpovídající ikona .
- Dalším stiskem tohoto tlačítka se masáž zastaví.

Ukončení masáže

- Pro zastavení masáže stiskněte tlačítko . Masážní hlavice zádové části se vrátí do jejich základní polohy a prováděná masáž bude zastavena.
- Abyste předešli poškození křesla nebo zranění osob, vždy po skončení masáže vypněte hlavní vypínač napájení a křeslo odpojte z elektrické zásuvky.

Údržba a způsob uskladnění

- Příklad: Přístroj používejte nebo skladujte pouze na suchých a málo-prašných místech.
 - Vlhkost a prach zkracují životnost masážního křesla a mohou být příčinami vzniku špinavých nebo plesnivých skvrn.
- Nevystavujte přístroj přímým slunečním paprskům nebo jej nenechávejte v blízkosti zařízení produkujících teplo, jako jsou například radiátory.
 - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo ke ztrátě jeho kvality.
- Při přenášení křesla vždy přidržujte část sedáku.
- Při přenášení křesla jej nedržte za podpěrky rukou, jinak by mohlo dojít k jejich poškození.
- Pokud dojde k zašpinění potahu křesla od sprchového gelu, vlasového šampónu nebo kondicionéru, vždy jej co nejrychleji utřete pomocí suchého hadříku. Jinak by mohlo dojít k poškození potahu (například ke změně barvy nebo vytvoření skvrn).
- Během horkých letních dnů nepoužívejte masážní křeslo po dlouhou dobu. Zabráníte přehřátí křesla a zajistíte tak křeslu jeho dlouhou životnost.



- Po skončení masáže se vždy ujistěte, že je vypnutý hlavní vypínač a napájecí kabel je odpojen z elektrické zásuvky.
- Při připojování nebo odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky nikdy nemějte mokré ruce
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Dálkové ovládání čistěte pouze suchou látkou. Jakákoli vlhkost by mohla dálkové ovládání poškodit.
- Pro čištění potahu používejte pouze jemný hadřík namočený ve vlažné vodě nebo mýdlovém roztoku. Po očištění potah řádně utřete do sucha.
- Při čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla, těkavé látky nebo bělidla.
 - Mohlo by dojít k změně barvy potahu nebo k jeho úplnému zničení.



Řešení potíží

Pokud se objeví nějaké problémy při používání křesla, zkuste nejprve najít řešení vašeho problému v následující tabulce. Pokud se vám i tak nepodaří vyřešit problém, pak masážní křeslo vypněte, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a kontaktujte svého prodejce.


UPOZORNĚNÍ!

Nikdy se sami nepokoušejte rozebírat nebo opravovat masážní křeslo!

Problém	Možná příčina
Hlasitý zvuk během kmitavé, hnětací nebo tlakové masáže.	Tyto zvuky jsou výsledky mechanické konstrukce masážního mechanismu a nejsou znakem problému s masážním křeslem.
Zvuk klepání během změny masážního programu z hnětací na kmitavou masáž nebo naopak.	
Zvuk vzduchové pumpy.	
Zvuk vibrací.	
Křeslo nejde ovládat pomocí dálkového ovládání.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen v elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda je hlavní přepínač v poloze „I“.
Masážní hlavice se přestaly pohybovat.	Neopírejte se příliš tvrdě o zádovou opěrku.
Křeslo se zastavilo během masáže.	Křeslo je používáno bez přestávky po dlouhou dobu a teplota jeho masážního mechanismu se příliš zvýšila. Vypněte křeslo a nechte je vychladnout.
	Vypršela nastavená doba masáže nebo došlo ke ztrátě napájení.

Technické parametry

Model:	DF1688F3-A1
Napájení:	AC 230V / 50Hz
Spotřeba:	180W
Maximální doba masáže:	30 minut
Hmotnost:	79kg
Rozměry:	1465 x 840 x 750 (V x Š x H)
Bezpečnostní ochrany:	Ochrana proti přehřátí, elektronický časovač

 Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškeré potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:
Compex spol. s r.o., Palackého 105, 612 00 Brno
 ve svém centrálním servisním středisku na výše uvedené adrese.
 ☎ 549 245 575; 602 766 759